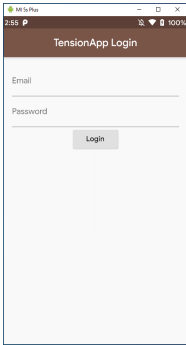

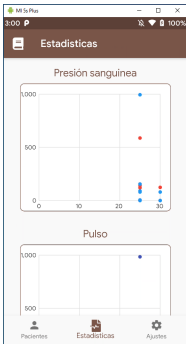
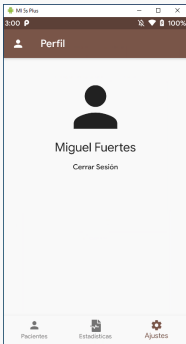


## Anexo 2: Pantallas de la App

### Pantallas generales

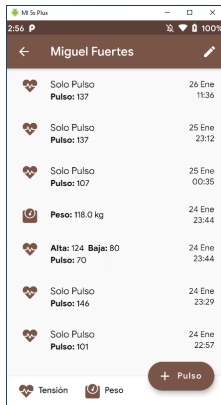
La aplicacion tiene varias 3 pantallas principales, como son **pacientes**, **estadisticas** y **perfil**, a parte de la pagina de login que solo veremos la primera vez que nos logueemos.

Pantalla	Comentario
	<b>Pantalla de login</b> Para poder acceder al sistema, el médico debiera hacer login en el sistema. <i>(A dia de hoy la unica forma de generar un usuario es mediante una llamada a la API, via postman, explicada en la parte del server.)</i>
	<b>Pantalla de Pacientes</b> Nad mas entrar en la aplicacion se nos presenta esta pantalla. Aqui veremos nuestros pacientes y podremos, clicando sobre ellos, consultar el historico de las medidas asi como realizar nuevas mediciones.
	<b>Pantalla de Estadisticas</b> La segunda pestaña que nos encontramos es la de estadística. Aqui se cargaran todos los datos numericos de todos los pacientes de todos los medicos en forma de grafica.
	<b>Pantalla de Perfil</b> La tercera pestaña es la del perfil de usuario. Aqui se encuentrasn todas las configuraciones de la plataforma asi como los datos privados de los médicos, nombre, apellidos, contraseña, etc.

### Pantallas de Medición

Si nos centramos en la pantalla de pacientes y entramos en su historico podremos introducir nuevas mediciones de peso, presion y pulso.

## Pantalla

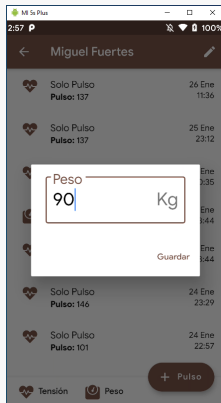


## Comentario

### Pantalla de historico de Paciente

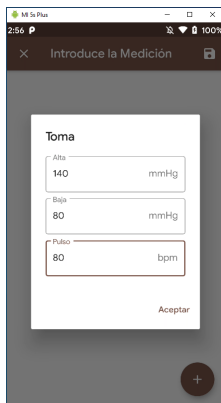
Al seleccionar un paciente de la lista de pacientes llegaremos a esta pantalla.

Aquí podemos ver las ultimas mediciones, asi como realizar nuevas.



### Pantalla de introduccion de peso

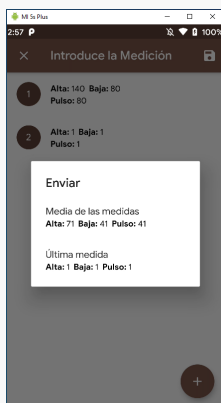
Pulsando sobre el boton **Peso** se nos desplegara un dialogo para introducir la medida.



### Pantalla de introduccion de tension

Pulsando sobre el boton **Tensión** se nos desplegara un dialogo para introducir la medida.

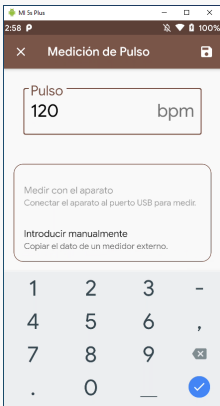

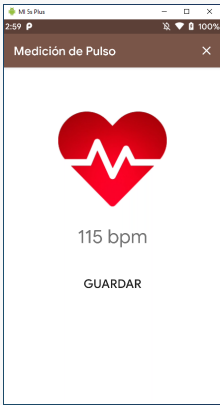
En este caso podemos introducir mas de una toma, simplemente dandole al boton "+"



### Pantalla de envio de tension

Cuando tengamos todas las tomas deseadas, simplemente las enviamos dandole al boton de guardar.

Se nos abra un cuadro de dialogo preguntando que queremos enviar, si la media o la ultima.

Pantalla	Comentario
	<p><b>Pantalla de introducción de pulso</b></p> <p>Pulsando sobre el boton <b>Pulso</b> se nos desplegara una para seleccionar como queremos introducir la medida.</p> <p>Podra ser manual, utilizando el flash y la camara del movil, o mediante un aparato conectado al USB del movil.</p> <p>Una vez tengamos la medida, simplemente le damos a guardar.</p> <p><i>(Actualmente la opcion USB esta por desarrollar)</i></p> <p><i>(La opcion de flash + camara solo esta disponible para Android)</i></p>
	<p><b>Pantalla de introducción de pulso</b></p> <p>Pulsando sobre el boton <b>introducir manualmente</b> se activara el campo de texto y podremos introducirla medida.</p>
	<p><b>Pantalla de introducción de pulso</b></p> <p>Pulsando sobre el boton <b>medir con el movil</b> se lanzara la siguiente pantalla y se encendera el flash del telefono.</p> <p><i>(Es necesario que haya un visor de la camara, para que funcione, asi que lo he camuflado en el corazon. Además sirve para atinar donde poner el dedo)</i></p>
	<p><b>Pantalla de introducción de pulso</b></p> <p>Cuando veamos que tenemos "xxx bpm" tras un tiempo, ya podremos darle a guardar.</p> <p>Volveremos a la primera pantalla, y veremos que el campo se ha rellenado automaticamente.</p>